



# Serologische Pipetten

## 1 ml – 70 ml



Pipettenfamilie von TPP.





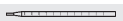




Eine ideale Kombination ist die Verwendung von TPP-Zellkulturflaschen mit TPP-Serologischen Pipetten: Sie erreichen jede Ecke selbst der kleinsten Zellkulturflasche mit der grossen Pipette.



Grosse Kapazitäten werden durch Reservoirs erreicht.

- Vollständiges Pipettensortiment von TPP: akkurat kalibrierte Volumina von 1 ml – 70 ml.
- Einzelverpackte, sterile Pipetten in stapelfähigen Dispensern mit doppeltem Öffnungsmechanismus:
  - Einzelbezug bequem durch die Aufreisslasche.
  - Bezug grosser Mengen durch den einfach zu öffnenden Klappdeckel.
- 94525: Volumen 25 ml + Reservoir 15 ml = Gesamtkapazität 40 ml
- 94550: Volumen 50 ml + Reservoir 20 ml = Gesamtkapazität 70 ml
  - Nennvolumina werden durch Reservoirs wesentlich vergrössert.
  - Spezielle gratfreie Pipettenspitzen aus einem Guss garantieren eine ausgezeichnete Tropfsicherheit.
  - Durch den nahtlosen Übergang vom Mundstück zur Spitze können sich keine Rückstände im Innern des Rohrs absetzen. Das bringt zusätzliche Sicherheit in der Routine.
  - Schlanke Form mit kleinem Aussendurchmesser und kurzer Länge, selbst bei grossen Kapazitäten! Dies optimiert das ergonomische Pipettieren unter der sterilen Werkbank.
  - Tiefer Endotoxinlevel von < 0.1 EU/ml und kristallklare Transparenz.
- Optimierte Mundstückform bei allen Pipetten schont den Pipettenhalter der Pipettierhilfe.

Weitere technische Informationen finden Sie unter [www.tpp.ch](http://www.tpp.ch).

Typ	Produkt-Nr.	Volumen	Reservoir	Farbcode	Dimensionen	Volumen Graduierung	Stück / Karton
	94001	1 ml		gelb	Ø 4.8 x 270 mm	1/100 ml	400
	94002	2 ml		grün	Ø 5.5 x 270 mm	1/100 ml	300
	94005	5 ml		blau	Ø 9.5 x 295 mm	1/10 ml	200
	94010	10 ml		orange	Ø 11.0 x 295 mm	1/10 ml	200
	94024	25 ml		rot	Ø 16.0 x 300 mm	2/10 ml	100
	94525	25 ml	15 ml	rot	Ø 13.5 x 345 mm	2/10 ml	60
	94550	50 ml	20 ml	violett	Ø 18.5 x 345 mm	1/10 ml	50

Ihr Händler